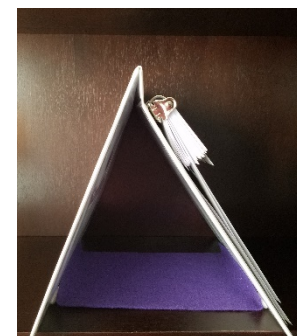


How to make the low-tech WordPower48 Español Basico SS book with flips

Why use a low-tech option?

- * Use as a **back - up** system for a high- tech system.
- * Use as a **beginner** board. This allows you to transition easily to the high- tech option using the same vocabulary arrangement. Or used while waiting for high-tech device.
- * Use as a **model** for teaching a classroom of students with language deficits.
- * The **communication partner** can also model using the low - tech option.
- * Use during **water** activities. If you punch holes in it, probably not great for submerging, but would last a decent amount of time to water splashes (water table). If you wanted to make the hole punched sheets more waterproof, leave enough lamination above the sheets to punch holes.

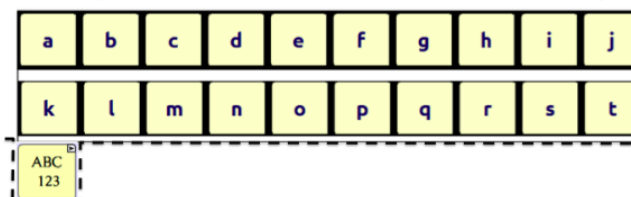





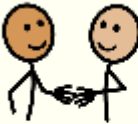























What materials are recommended?










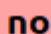

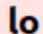
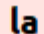




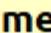
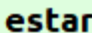






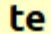
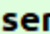






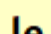
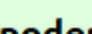
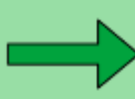





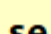





- ✓ **PDF file** of the book
- ✓ **Printer**-preferably color
- ✓ **Lamination** – For the book pictured here, I used a home laminator with 3 ml heat sealed sheets. I have used this laminator for years (over 10) for many different things (placemats, swimming games charts, etc.)
- ✓ **Binding** – Use 3 individual rings or a binder. I chose to leave the binder as is and added a felt stand to the outside of the book (attached with Velcro). This allowed the flips to stand up and then were easily flipped down instead of having to flip from the back. You could select any binding option that suits you. Basically you will want the flips to be able to flip up
- ✓ **Hole punch**- a 3-hole punch works nicely. This will be determined by the method of binding.
- ✓ **Scissors**

How?

1. **Print** out PDF file.
2. **Add** any **custom** pictures or words to appropriate flip locations. You can quickly glue a small square on a blank or over a word you do not find necessary for your client. It will be laminated over and kept secure.
3. **Cut** out the pieces. The full-page vocabulary should sit at the correct position to align the flips the way they are placed on the pages. You will see a dotted line between the flips to guide you in cutting. This cutting guide will provide you with the top of the next flip. Cut around the flip tabs and follow the line over, as well as straight across the bottom of the other flips. This should align the tops of the flips and leave equal space for the binding option. Printers vary in the way they align and print so check to see that it aligns correctly when you begin cutting.
4. **Laminate**- If you are using a page lamination system, you will simply put the pieces in the pages allowing enough space to leave a laminated edge. If you are using a roller type of laminator, make sure you leave enough space around the edges for the cut and a laminated edge.
5. **Cut** the pieces again- leave a small amount a lamination around edges to keep a seal (lasts longer this way)
6. **Bind**-Use a 3-hole punch or other punch option. (Rings or binder) Check to see the hole alignment matches as you go. Or use a binding machine.
7. **Other** -To make the binder stand up- you can add a strap or piece of material to back and front of the folder with Velcro.



ABC 123	GENTE 	PREGUNTAS 	LUGARES 	FRASES 	TIEMPO 	DESCRIBIR 	GRUPOS 
borrar	yo	no	que	lo	este... ese... un / una	bien 	más 
.	mi 	me	está	ayuda 	por-	en	de
él 	ella 	te	es	beber 	comer 	escuchar 	con
ellos 	nosotros 	le	puedo	vámonos 	jugar 	para 	y
EXTRA Mas Tu Por Palabras Para	tú 	se	quiero 	ACCIONES 	tengo 	ver 	ven 

	abrir 	acabar 	buscar 	comprar 	conseguir 	dar 	decir 
esperar 	IMPERATIVO 	no 	hablar 	lo 	la 	hacer 	necesitar 
mirar 	llevar 	me 	estar 	ayudar 	leer 	pensar 	poner 
regresar 	saber 	te 	ser 	beber 	comer 	escuchar 	terminar 
tomar 	trabajar 	le 	poder 	ir 	jugar 	parar 	venir 
traer 	gustar 	se 	querer 	INFINITIVO 	tener 	ver 	sentir 



1

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	Ñ	O


ABC
123

2

P	Q	R	S	T	U	V	W
X	Y	Z			.	?	!









0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	+	-	x	÷	=

3














	gente 	Familia 	abuela 	abuelo 	mujer 	hombre 	
mía mío	amigo 	amiga 	mamá 	papá 	niña 	niño 	bebé 


4



















su	hermana 	hermano 			hija 	hijo 	
tu	tía 	tío 	nos	nuestra nuestro	vosotros	usted 	ustedes 

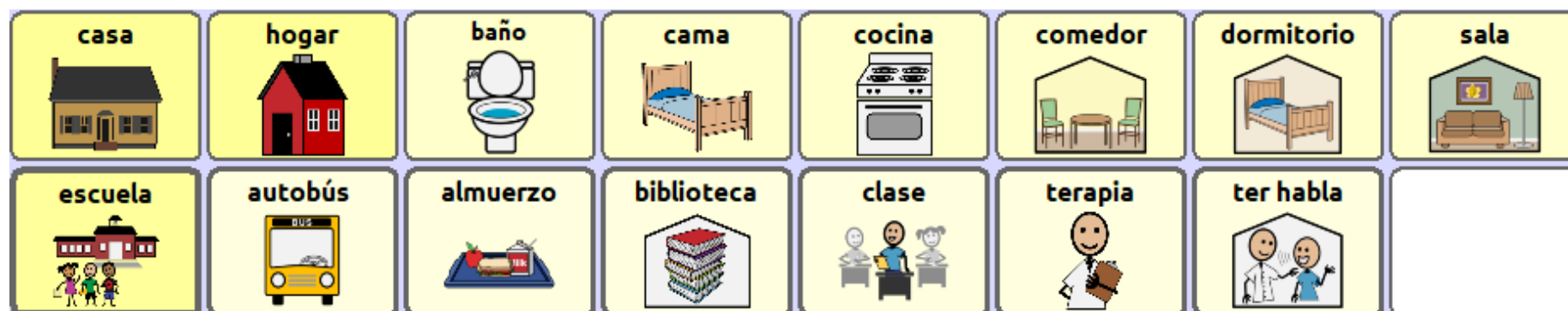
estudiante 						profesor 	profesora 
						maestro 	maestra 

pregunta 	quién 	cuánta 	cuánto 	adónde 	dónde 	A que hora.. 	Qué hora es? 
por qué 	¿Verdad? 	no	qué 	lo	cómo 	cuándo 	¿Qué vamos... 

PREGUNTAS


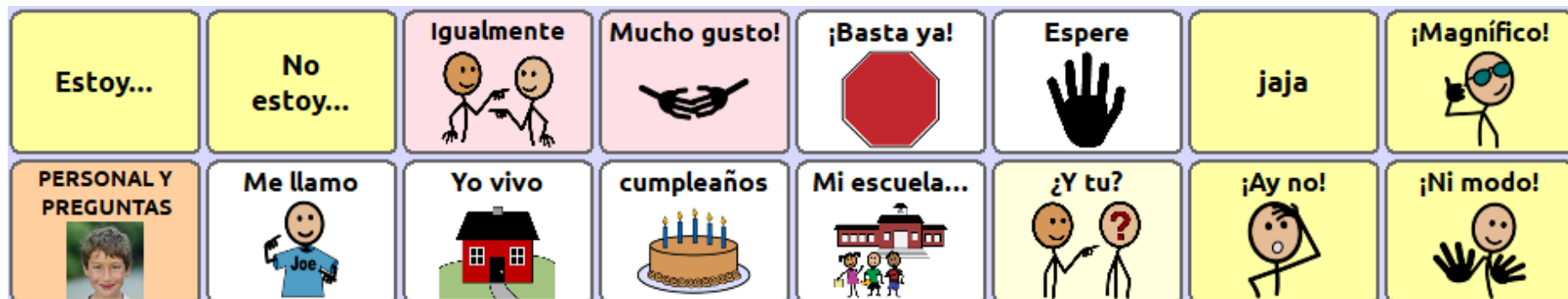
edificio 	médico 	rest'rant 	lugar 	tienda 	centro comercial 	gasolinera 	hospital 
aeropuerto 	banco 	boliche 	iglesia 	cine 	hotel 	super 	oficina correos 

LUGARES



1
1



1
2

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	día 
tiempo 	la mañana 	la tarde 	noche 	ayer 	hoy 	mañana 	
					TIEMPO 		

enero 	febrero 	marzo 	abril 	mayo 	junio 	julio 	agosto 
septiembre 	octubre 	noviembre 	diciembre 	mes 		2018	2019


fin de semana	pronto 	más tarde 	ahora 	antes 	después 	temprano 	tarde 
semana	primero 	próximo 	último 	primavera 	verano 	otoño 	invierno 

a	el	la	un	una	esto 	este	esta
al	los	las	unos	unas		estos	estas















TIEMPO



este...
ese...
un / una

aquel	aquella	aquello			eso 	ese	esa
aquellos	aquellas					esos	esas

1
7

feliz 	triste 	bueno 	mal 	agradable 	feo 	mucho	muy
cansado 	enfermo 	incómodo 	bonito 	malo 	grande 	pequeño 	delicioso 

1
8

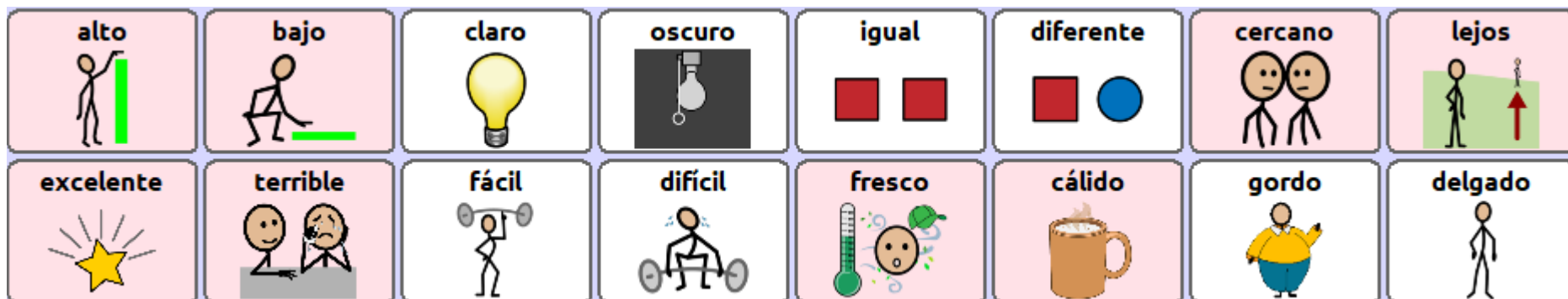




1
9



2
0



2
1



2
2



















2
3



2
4

joven 	viejo 					rico 	simpático 
primero 	último 					sorprendido 	tonto 

2
5

bebida 	agua 	leche 	leche choc 	jugo 	batido 	limonada 	soda 
merienda 	galletas saladas 	galleta 	queso 	puddín 	yogurt 	papas fritas 	salsa 
							GRUPOS 






2
6

desayuno 	cereal 	avena 	panqueques 	sirope 	huevos 	pan tostado 	salchicha 
comida 	hamburguesa 	papas fritas 	sándwich queso 	sándwich 	pollo 	pizza 	sopa 

2
7

frutas 	manzana 	naranja 	cereza 	fresa 	banana 	limón 	mango 
vegetales 	aguacate 	brócoli 	frijoles 	maíz 	papa 	repollo 	tomate 

2
8

forma geom 	círculo 	cuadrado 	triángulo 	rectángulo 	estrella 	corazón 	diamante 
El clima está	frio 	caliente 	sol 	lluvia 	nieve 	nube 	viento 







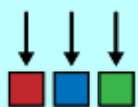




2
9



3
0




3
1


hay 	algo	acerca	dentro 	fuera 	alrededor 	arriba 	todo 
cada 	nada 	desde	a	al	izquierda 	abajo 	derecha 

ABC
123

borrar

.

él


ellos


EXTRA
Mas Tu Por
Palabras
Para



