

WordPower60 Español Básico – tutorial and reference guide



Nancy Inman & Pamela Corley

***On the main page, note the following:

un → una un → unos un → unas
 el → los la → las
 a → al por → porque
 mi → mis

1. Access to Quick Basic Communication with Picture Support:

Example a) Notice that when selecting the pronouns, the verb format automatically agrees.

As single hits on the main page, however, you'll see that several of the core verbs appear in the imperative form (Imp), or the first-person form (FP). These high frequency verb forms were selected because of their usefulness as *sentence starters*.

ayuda "help"	ayuda + me "help me"	(Imp)	vámonos "let's go"	(Imp)
Para "stop"		(Imp)	ven ven acá ven aquí "come" "come here" "come here"	(Imp)
quiero "I want"		(FP)	tengo "I have"	(FP)
puedo "I can"	"Can I ___?"	(FP)	di di + me "tell" "tell me"	(Imp)

Example b) quiero "I want"

(notice link to **COSAS FAVORITAS** "favorite things")

Quiero ver la televisión. "I want to watch TV."	Quiero ver una película. "I want to watch a movie."
Quiero beber leche con chocolate. "I want to drink chocolate milk."	Quiero comer contigo (<i>con + -tigo</i>). "I want to eat with you."
Quiero ir (TIEMPO) mañana. "I want to go tomorrow."	Quiero (COSAS FAVORITAS + nadar) ir a nadar. "I want to go swimming."

Example c) me gusta *“it pleases me”* (similar to *“I like”* and *“I would like”* in English)
me gustaría *“it would please me”* (notice link to **COSAS FAVORITAS** *“favorite things”*)

Me gusta (COSAS FAVORITAS + caballo) montar a caballo. <i>“I like to go horseback riding.”</i>	Me gusta escuchar música. <i>“I like to listen to music.”</i>
Me gusta comer en Chick-fil-A y Taco Bell. <i>“I like to eat at Chick-fil-A and Taco Bell.”</i>	Me gusta jugar contigo. <i>“I like to play with you.”</i>
Me gustan mis (GENTE) amigos. <i>“I like my friends.”</i>	Me gustaría leer un libro. <i>“I would like to read a book.”</i>

Example d) tengo *“I have”* (calor *“heat”* sed *“thirst”* frío *“cold”* hambre *“hunger”* miedo *“fear”* sueño *“sleepy”*)

Tengo mucha hambre <i>“I am really hungry.” (literally “I have hunger.”)</i>	Tengo sed. <i>“I am thirsty.” (literally “I have thirst.”)</i>
Tengo sueño. <i>“I am sleepy.”</i>	Tengo frío. <i>“I am cold.” (literally “I have cold.”)</i>
Tengo un problema. <i>“I have a problem.”</i>	

Example e) me siento *“I feel”* (literally *“I feel myself”*)
 (link to **DESCRIPCIÓN**). Notice “m” for masculine and “f” for feminine

Me siento triste. <i>“I feel sad.”</i>	Me siento cansado (masc). Me siento cansada (fem). <i>“I feel tired.”</i>
---	--

Example f) FRASES (quick access to often-used phrases).

Por favor <i>“Please”</i>	Muchas gracias <i>“Thank you very much”</i>	Te quiero mucho! <i>“I love you very much!”</i>	Espere un momento <i>“Wait a moment”</i>	¡Basta ya! <i>“Enough already!”</i>
Hola amigo <i>“Hello friend”</i>	Buenos días <i>“Good morning”</i>	¿Cómo estás? <i>“How are you?”</i>	Estoy muy bien <i>“I’m fine”</i>	Adiós - Hasta luego <i>“Bye - See you later”</i>

Example g) “ya”

¡Basta ya! (FRASES) <i>“Enough already!”</i>	Ya no quiero más. <i>“I don’t want anymore.”</i>	Lo quiero ya. <i>“I want it now.”</i>	Ya no me duele. <i>“It doesn’t hurt anymore.”</i>
Ya está aquí. <i>“He is here already.”</i>	Vámonos ya. <i>“Let’s go.”</i>	Ya no hay. <i>“Now, there is none.”</i>	

2. Direct Link from Verbs to Related Categories:

Example a) comer "to eat"

Quiero comer pizza con pepperoni y cebolla. <i>"I want to eat pizza with pepperoni and onion."</i>	Quiero comer contigo. <i>"I want to eat with you."</i>
Me gusta comer huevos con tocino. <i>"I like to eat eggs with bacon."</i>	Nosotros comemos palomitas de maíz. <i>"We eat popcorn."</i>

Example b) beber "to drink"

"Quiero beber Coca-Cola y un café con crema." <i>"I want to drink Coca-Cola and coffee with cream."</i>	Quiero beber un poco de limonada. <i>"I want to drink a little lemonade."</i>
Me gusta beber <u>refresco</u> de naranja. <i>"I like to drink orange soda."</i>	Quiero beber <u>jugó natural</u> de sandía. <i>"I want to drink watermelon juice."</i>
***Since the word "tomar" is so commonly used for drinking, if you say "quiero tomar," you'll see that links are provided to the BEBIDAS page.	

Example c) jugar "to play" (on JUGUETES page, you'll find links to JUEGOS "games," and DEPORTES "sports")

Me gusta jugar (JUEGOS) videojuegos. <i>"I like to play video games."</i>	Quiero jugar con mis carritos. <i>"I want to play with my cars."</i>
Me gusta jugar (DEPORTES) tenis. <i>"I like to play tennis."</i>	

Example d) leer "to read"

Quiero leer un libro. <i>"I want to read a book."</i>	Me gusta leer el periódico. <i>"I like to read the newspaper."</i>
No quiero leer el libro. <i>"I don't want to read the book."</i>	No me gusta leer el correo. <i>"I don't like to read the mail."</i>

Example e) me duele "it hurts me"

Me duele la cabeza. <i>"My head hurts me."</i>	Me duele el estómago. <i>"My stomach hurts me."</i>
Me duele mucho. <i>"It hurts me a lot."</i>	

3. Easy Access to Noun Categories in GRUPOS (word categories):

Mi bicicleta es azul. "My bicycle is blue."	hint: Find "bicicleta" in VEHÍCULOS or JUGUETES, and from that page COLORES for "azul."
Quiero ir a Hawaii. "I would like to go to Hawaii."	hint: Choose "quiero" on main page. Find "Hawaii" in GEOGRAFÍA (LUGARES →GEOGRAFIA) (NOTE: "a" and "al" appear automatically following "ir")
Tengo un auto y una camioneta. "I have a car and a pickup truck."	hint: Choose "tengo" on main page. Find "auto" and "camioneta" in VEHÍCULOS.
Me siento feliz porque puedo ir al concierto. "I feel happy because I can go to the concert."	hint: Choose MÚSICA to find "concierto."
Es mi canción favorita. "That is my favorite song."	hint: First, select the MÚSICA category. You will be able to speak this entire sentence from that category.

4. Verb forms automatically agree with Pronouns selected:

Example a) Main page verb "ayuda" ("help")

Ayuda + me = Ayúdame "Help me."
Yo ayudo. "I help."
Tú ayudas. (tú is the informal form of "you") "You help."
Él ayuda. "He helps."
Ellos ayudan. "They help."
Nosotros ayudamos. "We help."
Vosotros ayudáis. (vosotros is an informal form of plural "you," primarily used in Spain) "You help." (hint: find <u>vosotros</u> in GENTE)

Example b) First page of ACCIONES "hablar" ("to speak")

Yo hablo. "I speak."
Tú hablas. "You speak."
Él habla inglés. "He speaks English."
Ellos hablan inglés y español. "They speak English and Spanish."
Nosotros hablamos español. "We speak Spanish."

Example c) Second page of ACCIONES “bailar” (“to dance”)

(hint: navigate using the arrow in bottom right of screen)

Yo bailo. “I dance.”
Tú bailas. “You dance.”
Él baila. “He dances.”
Ellos bailan. “They dance.”
Nosotros bailamos. “We dance.”

Example d) ACCIONES A-Z (hint: select the pronoun and then the “ACCIONES A-Z” link)

Yo <u>conduzco</u> . “I drive.”	
Ella <u>pelea</u> conmigo. “She fights with me.”	(hint: look for “con” + “-migo” = “conmigo”)
Ellos <u>disfrutan</u> de la playa. “They enjoy the beach.”	(hint: look for “playa” in LUGARES)
Nosotros <u>montamos a caballo</u> en <u>la mañana</u> . “We ride horses in the morning.”	(hint: look for “a caballo” following “montamos;” look for “la mañana” in TIEMPO)

Notice there is an additional option with ACCIONES A-Z. In addition to choosing the pronoun on the main page and navigating to ACCIONES A-Z, once inside ACCIONES A-Z page you may select the pronoun on the left in yellow, and the verb forms change accordingly.



5. Verb forms included in WordPower60 Español Básico:

Present tense

Preterite *(Past tense verbs)*

Future *(express the future verb form by saying, "Yo voy a ___." (I am going to ___.)*

Infinitive *(to + verb)*

Present participle *(-ing)*

Imperativo *(Imperative verbs - find this link on the ACCIONES page)*

6. Verb forms appear in correct format automatically by semantic context:

Example a) quiero ("I want") + infinitives

Quiero comer. "I want to eat."	Quiero trabajar. "I want to work."	Quiero ayudar. "I want to help."
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------


Example b) Yo estoy ("I am") + present participle

Yo estoy bebiendo. "I'm drinking."	Yo estoy jugando. "I'm playing."	Yo estoy hablando español. "I'm speaking Spanish."
---------------------------------------	-------------------------------------	---

Example c) Yo voy a ("I am going") + infinitives

Yo voy a leer. "I'm going to read."	Yo voy a jugar con mi iPad. "I'm going to play with my iPad."	Yo voy a comer. "I'm going to eat."
Yo voy a comprarlo. (comprar + lo). "I'm going to buy it."		

7. To access the preterite verb tense (past tense), select the pronoun and present tense of the verb. The preterite form appears just to the right of the “tú” key.

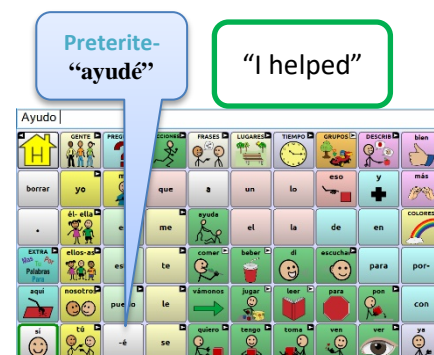

a) Preterite (“past tense”)

Yo ayudé mi (GENTE) amigo. “I helped my friend.”	(<i>hint: <u>ayuda</u> + <u>é</u> = ayudé</i>)
Tú trabajaste bien. “You worked well.”	(<i>hint: <u>trabajas</u> + <u>-aste</u> = trabajaste</i>)
Ellos me ayudaron (DESCRIBIR) mucho. “They helped me a lot.”	(<i>hint: <u>ayudan</u> + <u>-aron</u> = ayudaron</i>)

b) Future (i.e. “I am going to verb”)

Nosotros vamos a trabajar (TIEMPO) mañana. “We are going to work tomorrow.”
Yo voy a comprar un (VEHÍCULOS) auto. “I am going to buy a car.”

8. Core vocabulary included within categories:

The following sentences demonstrate the feature of core vocabulary included within categories.

ANIMALES	
Yo tengo dos peces.	<i>I have two fish.</i>
¿Quieres acariciar al gato?	<i>Do you want to pet the cat?</i>
Yo juego con la perra.	<i>I play with the dog.</i>
¿Qué color es el pájaro?	<i>What color is the bird?</i>
Yo tengo un conejo.	<i>I have a rabbit.</i>
¿Cuál es tu animal favorito?	<i>What is your favorite animal?</i>
Yo le doy de comer a la gallina.	<i>I feed the hen.</i>
Me gusta el tigre.	<i>I like the tiger.</i>
¿Dónde está el pollito?	<i>Where is the baby chick?</i>
MÚSICA	
Yo tengo una guitarra.	<i>I have a guitar.</i>
Mi música favorita es la (RITMOS) salsa.	<i>My favorite music is salsa.</i>
¿Qué instrumento musical tocas?	<i>What musical instrument do you play?</i>
Quiero ver un vídeo de música.	<i>I want to see a music video.</i>
Yo toco el tambor.	<i>I play the drum.</i>
Me gusta escuchar música.	<i>I like to listen to music.</i>
¿Te gusta la (RITMOS) bachata?	<i>Do you like bachata?</i>
Me encanta la (RITMOS) bachata.	<i>I love bachata.</i>
Es mi canción favorita.	<i>This is my favorite song.”</i>

ARTE		
Yo necesito el marcador (COLORES) rojo.		<i>I need the red marker.</i>
Yo estoy coloreando un dibujo.		<i>I am coloring a picture.</i>
¿Te gusta pintar?		<i>Do you like to paint?</i>
Quiero hacer un dibujo para ti.		<i>I want to make a drawing for you.</i>
Me gusta pintar con el color azul y amarillo.		<i>I like to color with blue and yellow.</i>
¿Quieres dibujar con la lápiz verde?		<i>Do you want to draw with the green pencil?</i>
Dame la cinta.		<i>Give me the tape.</i>
BEBIDAS Y COMIDAS		
Quiero un café con leche por favor.		<i>I want a coffee with milk please.</i>
Quiero tomar limonada.		<i>I want to drink lemonade.</i>
¿Quieres tomar té caliente?		<i>Do you want to drink hot tea?</i>
¿Bebes leche?		<i>Do you drink milk?</i>
Quiero más sopa por favor.		<i>I want more soup please.</i>
¿Dónde está el arroz?		<i>Where is the rice?</i>
Quiero (ACCIONES) cocinar enchiladas y frijoles.		<i>I want to cook enchiladas and beans.</i>

9. Masculine/feminine nouns agree with Adjectives:

In Spanish, adjectives must match the noun in terms of number and gender. This is done automatically when choosing a color to modify a noun in categories such as ANIMALES (*animals*), VEHÍCULOS (*vehicles*), and ROPA (*clothes*). ****Notice that the gender and number of the color changes automatically to agree with the nouns, and that the noun is positioned before the adjective.**

El perro negro "The black dog"	La gata negra "The black cat"	(ANIMALES - MASCOTAS)
Las gatas blancas "The white cats"	Los pájaros blancos "The white birds"	
La blusa roja "The red blouse"	El calzoncillo rojo "The red underwear"	(ROPA)
Un avión amarillo "A yellow plane"	Una camioneta amarilla "A yellow truck"	(VEHÍCULOS)

10. Plural fun!

In Spanish as in English, plural markers can be final –s or final –es depending upon the final letter of the noun. *****After selecting a noun, look for "-s" in the left column.**

- Try pluralizing these words: "pez" (*fish*), "libro" (*book*), "dólar" (*dollar*)

With two or three word noun concepts, the plural marker is typically on the first word. Choose the **TRABAJOS** category for the following examples:

colector de basura ("trash collector") → colectores de basura;
cuidador del zoológico ("zoo keeper") → cuidadores del zoológico;
programador de computadoras ("computer programmer") → programadores de computadoras.

Me gusta jugadores de béisbol.	"I like baseball players."
--------------------------------	----------------------------

11. Logical Next Words:

Yo estoy <u>listo</u> . (<i>masc</i>) "I am ready."	Yo estoy <u>lista</u> . (<i>fem</i>) "I am ready."	Yo no estoy <u>listo</u> . (<i>m</i>) "I am not ready."	Yo no estoy <u>lista</u> . (<i>f</i>) "I am not ready."
Yo necesito <u>ayuda</u> . "I need help."		Yo necesito más dinero. "I need more money."	
Una <u>vez</u> yo fui al (LUGARES) zoológico. "One time I went to the zoo."		(Hint: un > "una"	
Quiero <u>un poco</u> . "I want a little."			
Bien <u>hecho</u> . "Well done"			
Quiero ir <u>contigo</u> (<i>con + -tigo</i>). "I want to go with you."			
Quiero ver <u>una película</u> . "I want to watch a movie."			
Que <u>pasa</u> ? "What's going on?"			
No <u>sé</u> . "I don't know."			
No <u>hay</u> . "There is none."			
Mi <u>turno</u> . "My turn."	Mi <u>favorito</u> . "My favorite."	Su <u>turno</u> . "Your turn."	Su <u>favorita</u> . ***possessives in GENTE "Your favorite."
Ven <u>aquí</u> . "Come here."			
¿Qué tal? "How is it going?"		(Hint: PREGUNTAS y FRASES)	

12. PREGUNTAS (Questions):

In Spanish, the proper punctuation for questions is an upside down question mark (¿) at the beginning of the sentence and a regular question mark (?) at the end. When starting a question from the PREGUNTAS page, the "¿" appears automatically with WordPower60 Español Básico.

¿Qué vamos a comer? "What are we going to eat?"	¿De dónde es usted? "Where are you from?" (literally – From where are you?)
¿Quién va? "Who is going?"	¿Adónde vas? "Where are you going?"
¿Cuánto cuesta? "How much does it cost?"	¿Cómo se dice...? "How do you say...?"
¿Está lista? "Are you ready?"	¿Qué tal? "How is it going?"
¿Cuándo vas a venir? "When are you going to come?"	¿Cuándo vamos a la tienda? "When are we going to the store?"

13. Using the Imperative form of the Verb:

**Some imperatives appear on the main page, as well as on the first ACCIONES page. Others are found by selecting “ACCIONES+IMPERATIVO” or “ACCIONES+INFINITIVO+IMPERATIVO”

Ven aquí. “Come here.”	
Ayúdame. “Help me”	(ayuda + me + “ayúdame”)
Para (TIEMPO) ahora. “Stop now.”	
Vámonos a comer. “Let’s go eat.”	
¡Coman! “You [plural] eat!”	(Select the “ellos -as” key once you get to the IMPERATIVO page)
Dime. “Tell me.”	
Escucha y lee. “Listen and read.”	(Select ACCIONES → IMPERATIVO to find “escucha.”)

14. Other features in WordPower:


1. Select the GRUPOS key to find the CHISTES (Jokes). There are jokes and riddles. Try them out.
2. Select the GRUPOS key to find the NOTICIAS (News).
3. Select the GRUPOS key to find FOTOS. This gives access to a photo album that can be used to share pictures and experiences.

15. PUTTING IT ALL TOGETHER: try these sentences to practice your skills:

Me gusta comer en la taquería. “I like to eat at the taqueria.”	Me gusta comer en casa. “I like to eat at home.”	Me gusta comer en McDonald’s. “I like to eat at McDonald’s.”
Le gusta comer conmigo. “He/she likes to eat with me.”	¿Qué te gusta comer? “What do you like to eat?”	¿Quieres comer conmigo? “Do you want to eat with me?”
Tengo un perro y dos gatos en mi casa. (Hint: find “perros” and gata” in ANIMALES; “casa” in LUGARES) “I have one dog and two cats at my house.”		
Yo fui con ella. “I went with her.”	(Hint: “fui” follows “yo” on main page; select “él-ella” to find “ella”)	
Ya está. “That’s it.”	Ya vámonos “Let’s go.”	
Tengo algo para ti. “I have something for you.”	(Hint: find “algo” on the EXTRA PALABRAS page)	
No me siento bien. “I don’t feel well.”		

Tengo una (PREGUNTA) pregunta para ti. <i>"I have a question for you."</i>
Ya no me duele. <i>"It doesn't hurt anymore."</i>
Lo quiero ya. <i>"I want it now."</i>
Me gusta ir al parque con mis amigos. <i>"I like to go to the park with my friends."</i>
Él necesita medicina porque está (DESCRIBIR) enfermo. <i>(Hint: select "por-" to find "porque"</i> <i>"He needs medicine because he is sick."</i>
Yo voy a trabajar a las (TIEMPO → LA HORA) 8:30. <i>"I go to work at 8:30."</i>
Ellos están nadando en la (LUGARES) piscina. <i>(Hint: find "nadando" on the second page of ACCIONES)</i> <i>"They are swimming in the pool."</i>
El (LUGARES) aeropuerto es (DESCRIBIR) muy grande. <i>"The airport is really big."</i>
¿Te sientes enfermo? <i>"Are you feeling sick?"</i>
Ya no quiero más. <i>"I don't want anymore."</i>
Feliz Navidad y Año Nuevo. <i>(Hint: speak entire sentence using the DÍAS FESTIVOS category)</i> <i>"Merry Christmas and Happy New Year."</i>
Quiero ver la televisión contigo. <i>(Hint: con + -tigo = contigo)</i> <i>"I want to watch TV with you."</i>
Ella fue a la (LUGARES) playa. <i>"She went to the beach."</i>
Ella quiere ir al (LUGARES) cine (TIEMPO) mañana. <i>"She wants to go to the movie theater tomorrow."</i>

WordPower60 Español Básico

ABC 123	GENTE 	PREGUNTAS 	ACCIONES 	FRASES 	LUGARES 	TIEMPO 	GRUPOS 	DESCRIBIR 	bien 'well'
clear	yo 'I'	mi 'my'	que 'that' 'what'	a 'to'	un 'a'	lo 'it'	eso 'that'	y 'and'	más 'more'
.	él- ella 'he / she'	es 'is'	me 'myself'	ayuda 'help'	el 'the' (m)	la 'the' (f)	de 'of / from'	en 'in / at'	COLORES 
EXTRA Mas Tu Por Palabras Para	ellos-as 'they'	está 'is'	te 'yourself'	comer 'to eat'	beber 'to drink'	di 'say / tell'	escuchar 'to listen'	para 'for / to'	por 'by / for' porque 'because'
aquí 'here'	nosotros 'we'	puedo 'I can'	le indirect object pronoun	vámonos 'let's go'	jugar 'to play'	lee 'read'	para 'stop'	pon 'put'	con 'with'
sí / 'yes' 	tú 'you'	no 	se 'itself' 'herself' 'himself'	quiero 'I want'	tengo 'I have'	toma 'take'	ven 'come'	ver 'see' 'watch'	ya 'already'