

WordPower: Discover Bilingual Options

Nancy Inman, M.A.T., CCC-SLP
Inman Innovations

Lisa Timm, M.S., CCC-SLP
PRC-Salttillo



© 2021 PRC-Salttillo. All Rights Reserved.

1

Housekeeping

- *Having trouble hearing or connecting to this class?*
- FIRST
 - ✓ log out and back into the training
 - ✓ re-start your computer
- If that doesn't help, call LogMeIn: 1-888-259-8414
- Training materials found in handouts section of the toolbar
- Feedback survey will pop up as you leave the class
- Type your questions in the chat window and they will be addressed by the presenter at the end, as time allows.

© 2021 PRC-Salttillo. All Rights Reserved.

2

ASHA CEUs: *If you use the ASHA CEU registry to track your CEUs*

- You must stay online on a computer the entire time and actively participate
- Submit ASHA participation form within 15 days- **Please include training date on the form**
- Instructions and participation forms are in the handouts section of the Go To Training toolbar
- Make sure to put the **name of the class and the date in the subject line of your email** when submitting the CEU form to info@prc-salttillo.com

If you don't use the ASHA CEU registry to track your CEUs you can use the attached certificate as proof of attendance.



ASHA CE
APPROVED PROVIDER

PRC-Salttillo
Introductory Level
.10 ASHA CEUs

© 2021 PRC-Salttillo. All Rights Reserved.

3

Presenter Disclosures

- Nancy Inman - owner of Inman Innovations, Inc. She receives royalties for WordPower software
- Lisa Timm - employee-owner at PRC-Salttillo

© 2021 PRC-Salttillo. All Rights Reserved.

4

Objectives

- List WordPower files available in Spanish
- List WordPower files available in French.
- Describe how the files offer bilingual support options.

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

5

Bilingual Options

Español

français

Profiles

Resources

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

6


Bilingual Options

Español


© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

7


WordPower Español

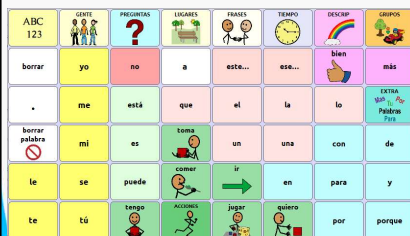

WordPower48 Español

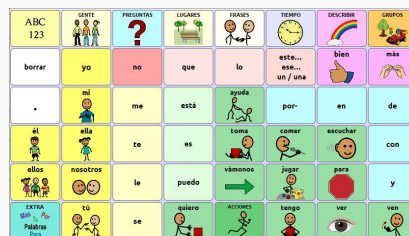

WordPower48 Español Básico

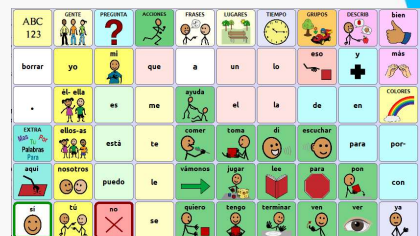

WordPower60 Español Básico

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

8

WordPower60 Español Básico

-designed to compliment and mirror WordPower60 Basic for the bi-lingual user



WP60 Basic English



English

I like...
I don't like ...
I want + ... () or infinitive verbs)
I want to watch with you.
I am ready to ...
I love to read ...
I am watching TV.
I am going to listen to music.
What do you like to play?
I am really hungry.
I feel good.
Good job.
I don't know. / There is no...
I have a problem.
in → front / back
with you
my turn
your turn

WP60 Español Básico



Español

Me gusta ...
No me gusta ...
Quiero + ... () or infinitive verbs)
Quiero ver contigo.
Yo estoy listo para ...
Me encanta leer ...
(Yo) estoy viendo la televisión.
(Yo) voy a escuchar música.
¿Qué te gusta jugar?
Tengo mucha hambre.
Me siento bien.
Bien hecho.
No sé. / No hay...
Tengo un problema.
de → delante/ detrás
contigo (con + -tigo)
mi turno
tu turno

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

9

WordPower60 Español Básico

-designed to compliment and mirror WordPower60 Basic for the bi-lingual user



© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

10

Coming soon

• WordPower25 Español



© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

11

Coming soon

WordPower25 Touch& Scan



WordPower25 Español



© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

12

Bilingual Options

français

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

13

WordPower120 français

QUESTES	DEUX	LIRES	TEMPS	CONVERSATION	STRA	DEUX	bon	très	bien	plus	LATISSIMO
qu'est-ce que	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	-s
est-ce que	A	S	D	F	G	H	J	K	L	retour	.
que	Maj 123	Z	X	C	espace	V	B	N	M	à	au
je	moi	mon ma, mes	être	aider	aimer	aller	boire	autre	avec	le	la
tu	toi	ton votre..	avoir	chercher	dire	donner	écouter	dans	de	un	une
elle	ce	son notre..	est	faire	finir	jouer	manger	comme	et	en	ici
il	lui	ne	c'est	mettre	parler	penser	prendre	mais	même	parce que	pour
nous	eux	pas	pouv-oir	rester	regarder	savoir	travailler	par	rien	sans	si
vous	on	ça	vouloir	ACTIONS	trouver	voir	venir	sur	tout	y	efface tout

QWERTY

QUESTES	DEUX	LIRES	TEMPS	CONVERSATION	STRA	DEUX	bon	très	bien	plus	LATISSIMO
qu'est-ce que	A	Z	E	R	T	Y	U	I	O	P	-s
est-ce que	Q	S	D	F	G	H	J	K	L	M	.
que	Maj 123	W	X	C	espace	V	B	N	retour	à	au
je	moi	mon ma, mes	être	aider	aimer	aller	boire	autre	avec	le	la
tu	toi	ton votre..	avoir	chercher	dire	donner	écouter	dans	de	un	une
elle	ce	son notre..	est	faire	finir	jouer	manger	comme	et	en	ici
il	lui	ne	c'est	mettre	parler	penser	prendre	mais	même	parce que	pour
nous	eux	pas	pouv-oir	rester	regarder	savoir	travailler	par	rien	sans	si
vous	on	ça	vouloir	ACTIONS	trouver	voir	venir	sur	tout	y	efface tout

AZERTY

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

14

WordPower60 français

-designed to compliment
and mirror WordPower60
Basic for the bi-lingual user



ABC 123	GENS 	QUESTION 	ACTIONS 	CONVERS'N 	LIEUX 	TEMPS 	CATÉGORIE 	DÉCRIRE 	bien
efface tout	je 	moi 	mon ma mes ta ton votre notre	aimer 	aider 	un 	à 	au 	plus
.	tu 	toi 	avoir 	aller 	arrêter 	dire 	le 	la 	COULEUR
EXTRA et ça la mots en haut	elle- il on	ce	est	faire 	écouter 	jouer 	lire 	avec 	et
ici 	nous 	que	pouvoir 	manger 	boire 	mettre 	prendre 	dans 	en
ça 	vous 	ne	de	vouloir 	regarder 	travailler 	venir 	pour par	tout

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

15

WordPower60 français

-designed to compliment
and mirror WordPower60
Basic for the bi-lingual user



WordPower60 Basic


WordPower60 français

ABC 123	PEOPLE 	QUESTION 	ACTIONS 	SOCIAL 	PLACES 	TIME 	GROUPS 	DESCRIBE 	good
clear	I	me	to	come	that	a-	the	and	more
.	my	is	eat	drink	finish	get	all	at	COLORS
EXTRA et ça la mots en haut	it	can	go	help	open	put	in	for	on
here	you	do	like	play	read	stop	out	up	off
yes	your	no	want	take	tell	turn	watch	down	with


ABC 123	GENS 	QUESTION 	ACTIONS 	CONVERS'N 	LIEUX 	TEMPS 	CATÉGORIE 	DÉCRIRE 	bien
efface tout	je 	moi 	mon ma mes ta ton votre notre	aimer 	aider 	un 	à 	au 	plus
.	tu 	toi 	avoir 	aller 	arrêter 	dire 	le 	la 	COULEUR
EXTRA et ça la mots en haut	elle- il on	ce	est	faire 	écouter 	jouer 	lire 	avec 	et
ici 	nous 	que	pouvoir 	manger 	boire 	mettre 	prendre 	dans 	en
ça 	vous 	ne	de	vouloir 	regarder 	travailler 	venir 	pour par	tout

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

16

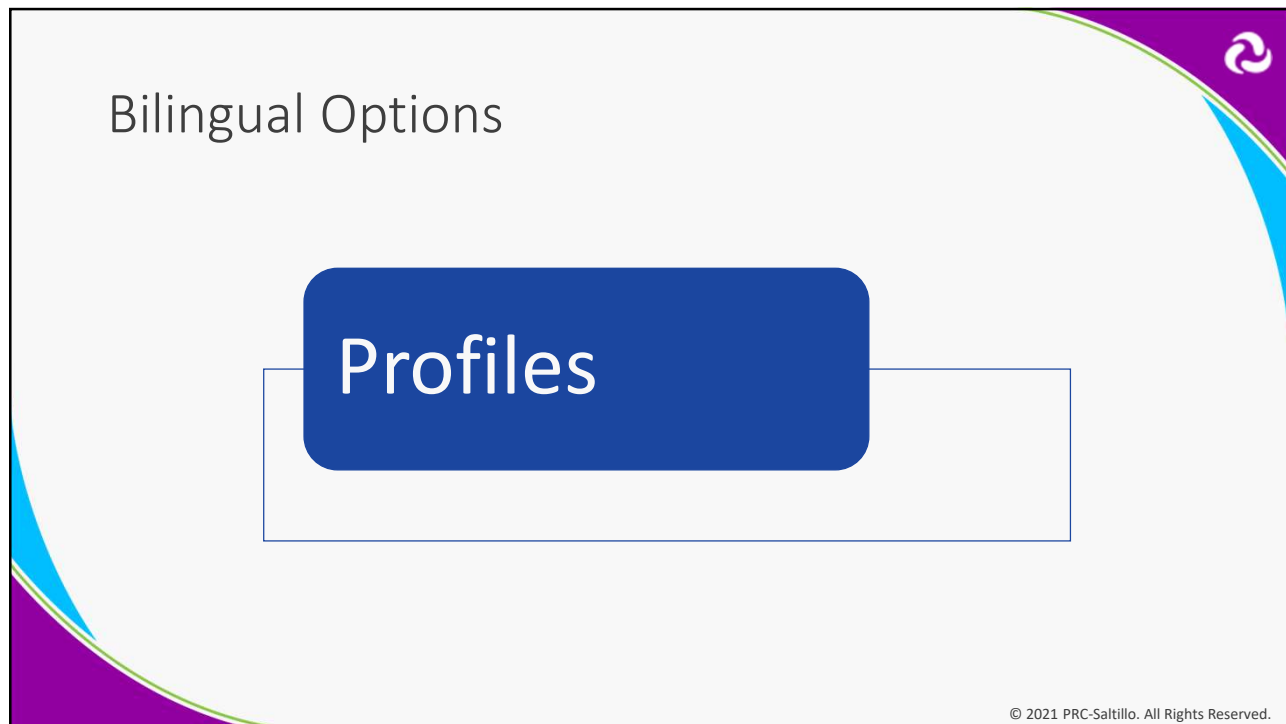

17

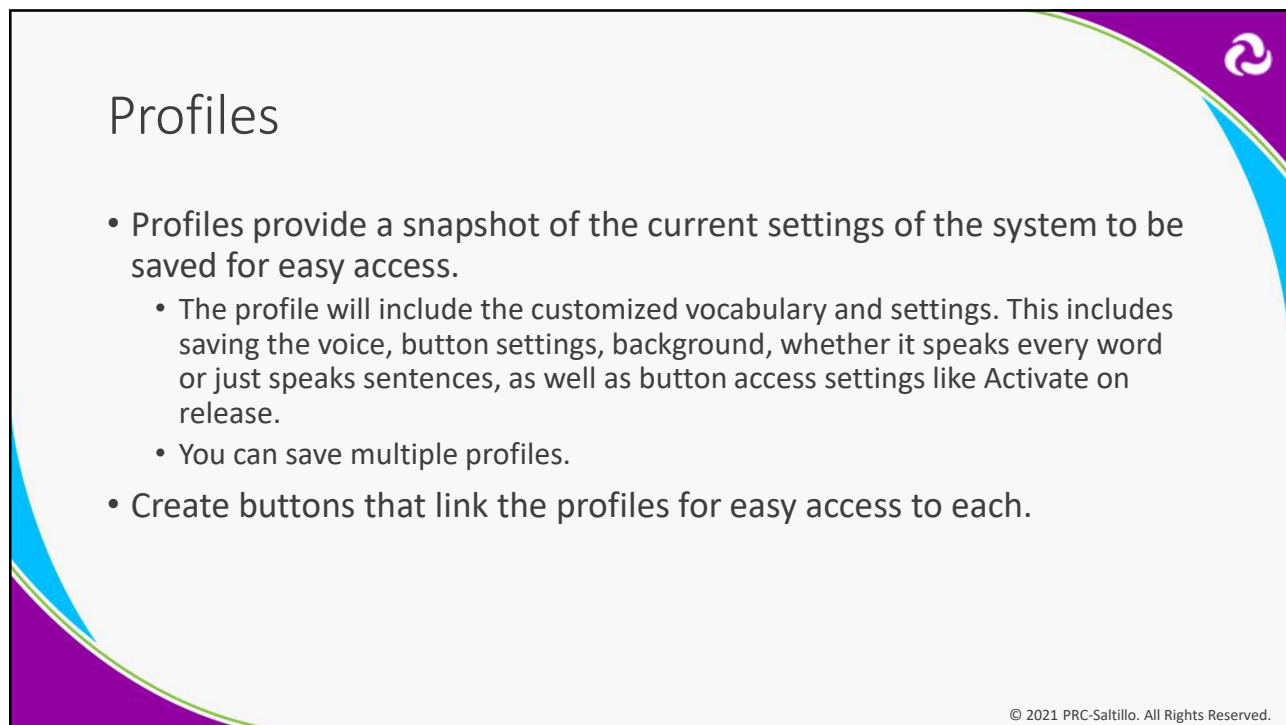

18

Bilingual Options

Resources

© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

19

Manuals & Teaching Tips

- [WordPower48 Español Teaching Tips & Picture Support](#)
- [WordPower48 Español Básico - Teaching Tips & Picture Support](#)
- [WordPower60 Español Básico – Teaching Tips & Picture Support](#)
- [WordPower120 français manual](#)
- [WordPower60 français manual](#)


© 2021 PRC-Saltito. All Rights Reserved.

20

Classes/YouTube

- Saltillo [YouTube](#)

Product Features & How-To's: Español ▶ PLAY ALL

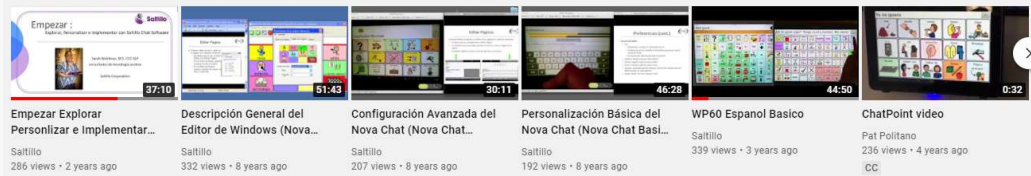

- TouchChat [YouTube](#)

TouchChat Features & How-To's: Español ▶ PLAY ALL



© 2021 PRC-Salttillo. All Rights Reserved.

21

Questions?

Nancy Inman, M.A.T., CCC-SLP
Inman Innovations



Lisa Timm, M.S., CCC-SLP
PRC-Salttillo



© 2021 PRC-Salttillo. All Rights Reserved.

22

Thank You!

- Reminder:
- Submit ASHA forms within 15 days and include today's date and the name of the class in the subject line of your email to: info@prc-salttillo.com

